

PulsaClean® Pulse Lavage System

INHALT	ANZAHL	ART.-NR.
Handstück, langer Aufsatz, kurzer Aufsatz	1	LD 1000



PulsaClean® Zubehör

INHALT	ANZAHL	ART.-NR.
Femurkanalbürste	1	LD 1010
Kurzer Aufsatz für Knie-TEP und sonstige Debridement	1	LD 1020



 **aap Implantate AG**
 Lorenzweg 5 • 12099 Berlin
 Germany
 Tel. +49 30 75019-0
 Fax +49 30 75019-111
customer.service@aap.de
www.aap.de

 **Verantwortlicher Hersteller:**
**Guangzhou Clean Medical Products
 Manufacturing Corp.**
 No. 9 Guangcong Road
 510990 Conghua Development District
 Guangzhou, China
 Tel. +86 20 87654060
 Fax +86 20 87303882
cleanmfg@yahoo.com.cn
www.cleanmfg.com

WP 3F0130 DE / 1503

PulsaClean®

PulsaClean® ist ein effektives und einfaches Einweg Pulse Lavage System zur intensiven Wundreinigung von Knochen- oder Gewebedefekten. Mit seinen zwei Aufsätzen, sowohl für Knie- als auch Hüftarthroplastien, und seiner Spül- und Absaugvorrichtung ermöglicht PulsaClean® eine optimale Behandlungsflexibilität für den Anwender ohne zusätzlichen logistischen Aufwand.

Vorteile

- ▶ Ein System für unterschiedlichste Anwendungsgebiete mit beigelegtem kurzen und langen Aufsatz führt zu minimiertem logistischen Aufwand
- ▶ Antrieb durch zehn 1,5V AA R6 Batterien; Gerätebetrieb mit Spannung von 12V bei 8,5W Geräteleistung
- ▶ Betriebsdauer von ca. 30 min bei kontinuierlicher Anwendung
- ▶ Latexfreies Produkt
- ▶ Leichtes Handstück mit einem Gewicht von < 0,13 kg, da Batterien im externen Batteriepack (Nettogewicht der Einweg Lavage < 0,8 kg)
- ▶ Einfache Hängevorrichtung für das Batteriepack
- ▶ Benutzerfreundlicher Klickmechanismus zur sicheren Befestigung der Aufsätze
- ▶ Zwei Fließgeschwindigkeiten mit > 0,9l/min (langer Aufsatz) und > 1,0l/min (kurzer Aufsatz)
- ▶ Intensive und gleichzeitig schonende Reinigungswirkung durch nebelartigen Spüldruck von > 10 psi
- ▶ Anwenderfreundlicher Geräuschpegel von < 75 dB(A)
- ▶ Ergonomischer Handgriff mit ca. 3 m langen integrierten Spül- und Saugschläuchen ermöglicht komfortable Handhabung für Operateur
- ▶ Hohe Patientensicherheit, da spezielle Klemmen den Rückfluss der Spüllösung verhindern




Indikationen

Das PulsaClean® Pulse Lavage System dient zur intensiven Wundreinigung von Knochen- oder Gewebedefekten, wie z.B. bei

- Zementierten und zementfreien TEP (Knie & Hüfte)
- Revisionen von Endoprothesen
- Chirurgischen Eingriffen
- Wundversorgung

PulsaClean® Pulse Lavage System auf einen Blick

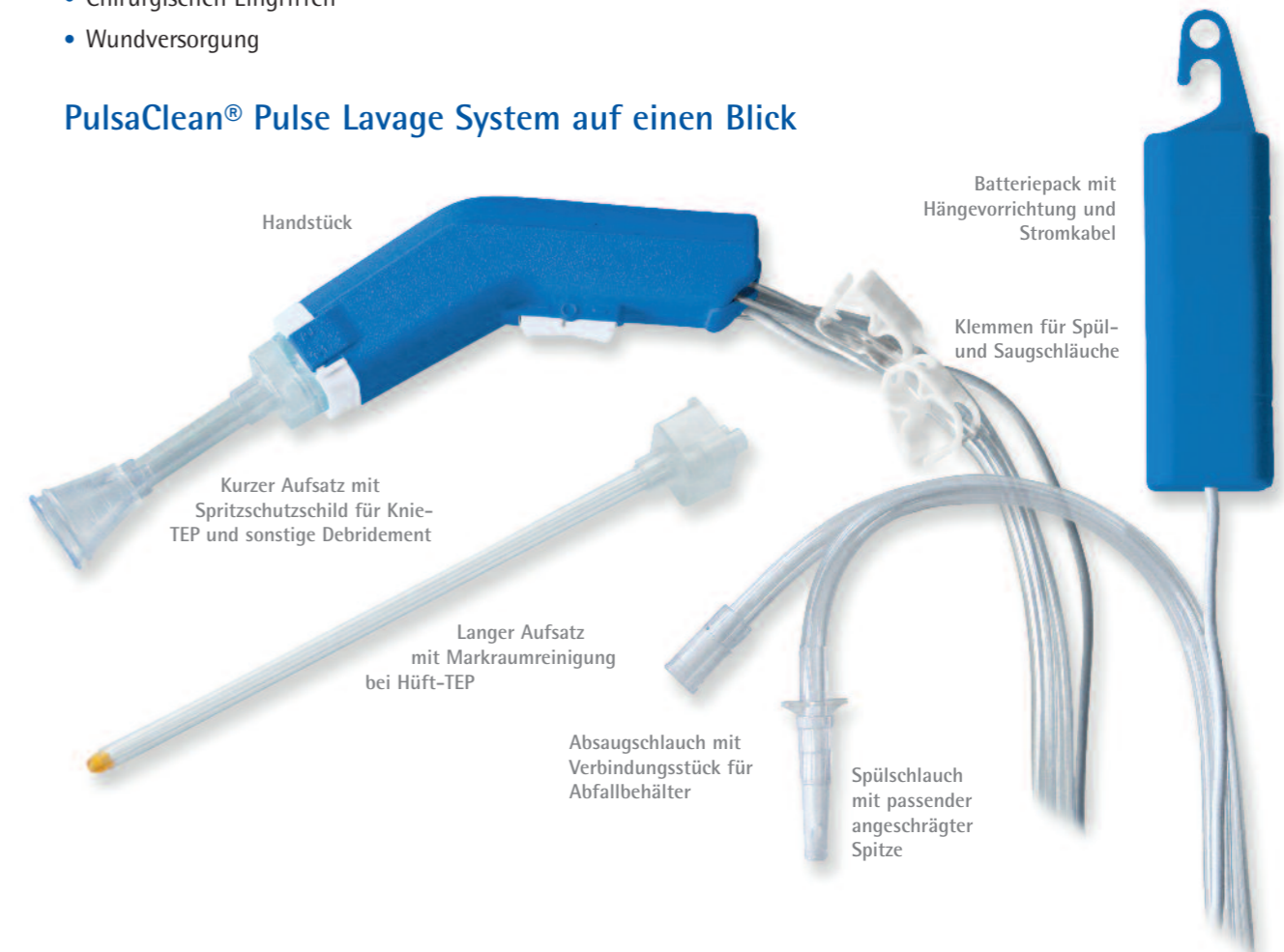

Einfache und sichere Anwendung durch Aufsatzbefestigung mit einem »Klick«



Das PulsaClean® Handstück enthält eine spezielle Ansatzvorrichtung, welche komplementär zu den Aufsätzen ist. Die im Durchmesser unterschiedlichen Öffnungen verhindern ein falsches Aufstecken der Aufsätze, so dass die Spül- und Saugleitungen nicht verwechselt werden können.

Mittels eines Klickmechanismus können die Aufsätze fest am Handstück fixiert werden und verhindern so ein Lösen während des Gebrauches.

PulsaClean® Femurkanalbürste



Zusätzlich zum PulsaClean® Lavage System mit jeweils einem kurzen und einem langen Aufsatz, gibt es eine Femurkanalbürste. Die kurzen stabilen Borsten ermöglichen eine intensive Reinigung bis tief in den Markkanal. Analog zu den Spülaufsätzen bietet auch die Kanalbürste eine Spül- und Absaugfunktion.